

DIRECTIVES D'UTILISATION

Pr**EMGALITY**^{MC}

galcanézumab injectable

**solution pour injection sous-cutanée à 120 mg/mL
stylo-injecteur prérempli**



www.lilly.ca

Lilly

Avant d'utiliser le stylo prérempli EMGALITY, lisez attentivement et suivez toutes les directives étape par étape.


Renseignements importants

- Votre professionnel de la santé devrait vous montrer comment préparer et vous injecter EMGALITY à l'aide du stylo-injecteur. Ne vous injectez pas EMGALITY et ne l'injectez pas à une autre personne avant d'avoir reçu une formation pour ce faire.
- Conservez les présentes Directives d'utilisation afin de pouvoir les consulter ultérieurement au besoin.
- Chaque stylo-injecteur EMGALITY est destiné à **un usage unique**. Ne partagez pas et ne réutilisez pas votre stylo-injecteur EMGALITY. Vous pourriez transmettre ou contracter une infection.
- Certaines parties du stylo-injecteur sont en verre. Manipulez-le avec soin. Si vous l'échappez sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez plutôt un nouveau stylo pour votre injection.
- Votre professionnel de la santé pourra vous aider à déterminer à quel endroit de votre corps injecter le médicament. Vous pouvez également lire la section « **Choisissez le point d'injection** » des présentes directives pour choisir l'endroit de votre corps qui vous convient le mieux.
- Si vous avez un trouble de la vue ou de l'ouïe, **n'utilisez pas** le stylo-injecteur EMGALITY sans l'assistance d'un aidant.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Avant d'utiliser le stylo-injecteur EMGALITY, lisez attentivement et suivez toutes les directives étape par étape.

Composantes du stylo-injecteur EMGALITY

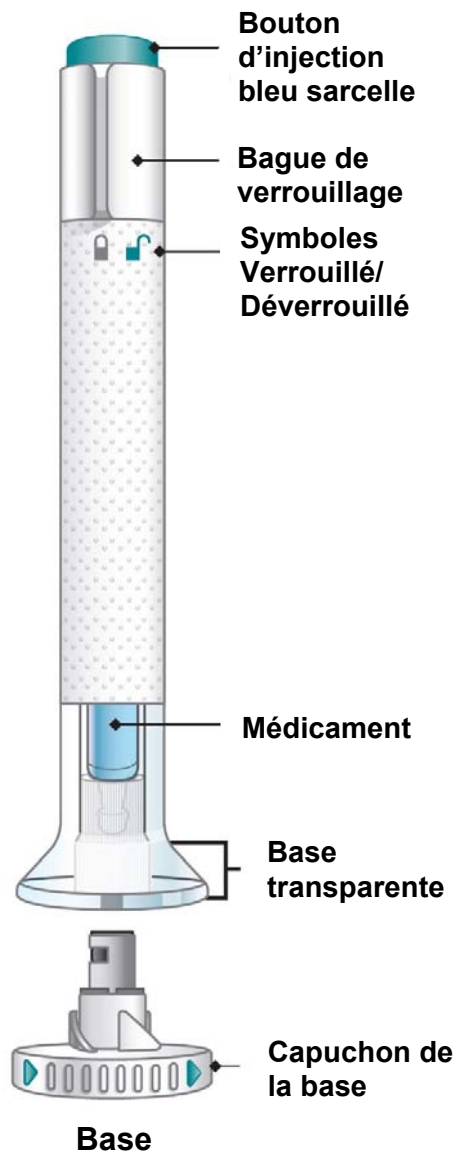

Avant de commencer

Sortez le stylo-injecteur du réfrigérateur

Remettez les stylos-injecteurs non utilisés au réfrigérateur, dans l'emballage original.

Laissez le capuchon de la base sur le stylo-injecteur jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Afin de rendre l'injection plus confortable, laissez reposer le stylo-injecteur à la température ambiante pendant 30 minutes avant l'injection.

Ne placez pas le stylo-injecteur dans un four à micro-ondes, dans de l'eau chaude ou sous la lumière directe du soleil.

Ne l'agitez pas.

Inspectez le stylo-injecteur et le médicament

Assurez-vous d'avoir le bon médicament. La solution à l'intérieur doit être claire. Elle peut être incolore à jaunâtre.

N'utilisez pas le stylo-injecteur et mettez-le au rebut en suivant les consignes de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien :

- s'il semble endommagé;
- si le médicament est trouble, a une couleur anormale ou contient de petites particules;
- si la date de péremption imprimée sur l'étiquette est passée;
- si le médicament a été congelé.


Date de péremption



Préparez l'injection

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant de vous injecter EMGALITY. Ayez à portée de main un contenant résistant aux perforations.


Choisissez le point d'injection

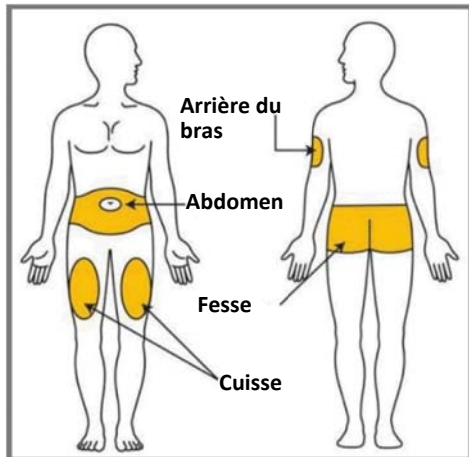


Votre professionnel de la santé peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.

- **Vous** pouvez vous injecter le médicament dans l'abdomen (ventre) ou la cuisse. Ne vous injectez pas à moins de 2 pouces (5 cm) du nombril.
- Une **autre personne** peut également vous l'injecter dans la partie supérieure arrière de votre bras ou dans la fesse.
- **N'injectez pas** le médicament exactement au même endroit d'une fois à l'autre. Par exemple, si vous avez fait la première injection dans l'abdomen, vous pouvez faire l'injection suivante à un autre endroit de l'abdomen.
- **Nettoyez et laissez sécher la zone avant l'injection.**

1 Retirez le capuchon


 **Assurez-vous que le stylo est verrouillé. Laissez le capuchon de la base sur le stylo jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.**


- Dévissez le capuchon de la base et jetez-le dans la poubelle.
- **Ne remettez pas** le capuchon en place – vous pourriez endommager l'aiguille.
- **Ne touchez pas** l'aiguille.

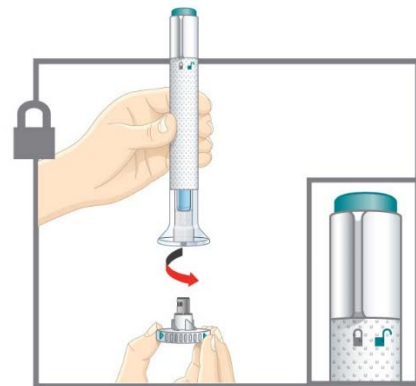

2 Placez et déverrouillez



- Placez et maintenez fermement la base transparente bien à plat contre le point d'injection et

- appuyez-la fermement sur votre peau.
-  Tournez la bague de verrouillage en position **déverrouillé**.

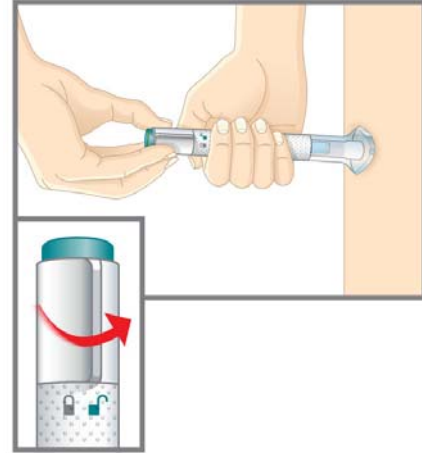

3 Appuyez et maintenez pendant 10 secondes

- Appuyez sur le bouton d'injection bleu sarcelle et maintenez-le enfoncé; vous devez entendre un « clic » fort.
- Continuez à maintenir fermement la base transparente sur votre peau.** Vous devez entendre un second « clic » environ 10 secondes après le premier. Ce second « clic » vous indique que l'injection est terminée.
- Retirez le stylo de votre peau.

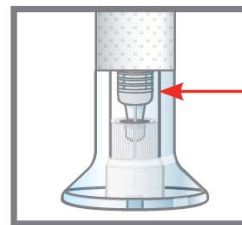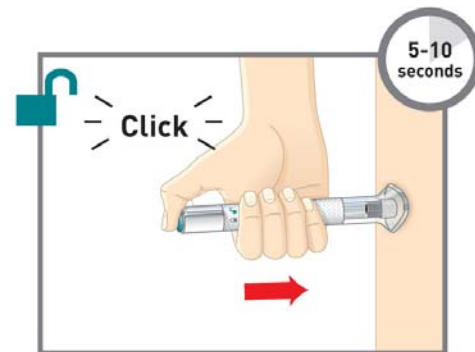


Vous saurez que l'injection est terminée lorsque le piston gris sera visible.

Une fois l'injection de votre médicament terminée

Mettez au rebut le stylo-injecteur utilisé

- Immédiatement après l'injection, jetez le stylo-injecteur EMGALITY utilisé dans un contenant résistant aux perforations. **Ne jetez pas** le stylo-injecteur EMGALITY dans vos ordures ménagères.

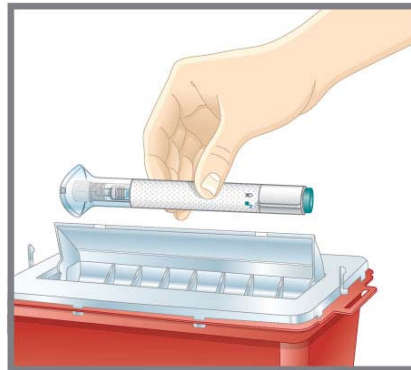

- Si vous n'avez pas de contenant résistant aux perforations, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :
 - est fait de plastique résistant;
 - peut être refermé au moyen d'un couvercle étanche, résistant aux perforations et qui empêche les objets pointus de sortir;
 - reste droit et stable pendant l'utilisation;
 - résiste aux fuites; et
 - est muni d'une étiquette indiquant que le contenu est dangereux.
- Lorsque votre contenant résistant aux perforations est presque plein, vous devez suivre les directives de votre localité pour vous en débarrasser correctement. Il existe peut-être des lois provinciales ou locales sur la mise au rebut des aiguilles et des stylos-injecteurs. Pour connaître la bonne façon de mettre au rebut votre contenant, communiquez avec votre professionnel de la santé.
- **Ne recyclez pas** votre contenant résistant aux perforations une fois qu'il a été utilisé.

Questions fréquentes

Q. Que faire si je vois des bulles d'air dans le stylo-injecteur?

R. La présence de bulles d'air dans le stylo-injecteur est normale. EMGALITY est injecté sous la peau (injection sous-cutanée).

Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille lorsque j'enlève le capuchon de la base?

R. C'est normal de voir une goutte de liquide au bout de l'aiguille.

Q. Que faire si j'ai déverrouillé le stylo-injecteur et appuyé sur le bouton d'injection bleu sarcelle avant d'avoir dévissé le capuchon de la base?

R. Ne retirez pas le capuchon de la base. Mettez le stylo-injecteur au rebut et prenez un nouveau stylo.

Q. Dois-je maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection?

R. Ce n'est pas nécessaire, mais cela pourrait vous aider à maintenir fermement le stylo contre votre peau.

Q. Que faire si l'aiguille ne se rétracte pas après l'injection?

R. Ne touchez pas l'aiguille et ne remettez pas le capuchon de l'aiguille. Conservez le stylo-injecteur dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle et appelez au 1-888-545-5972 pour obtenir des instructions sur la façon de retourner le stylo-injecteur.

Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection?

R. C'est normal. Comprimez le point d'injection avec un tampon d'ouate ou une compresse de gaze. Ne frottez pas le point d'injection.

Q. J'ai entendu plus de deux « clics » pendant l'injection (deux « clics » forts et un plus faible) : qu'est-ce que cela signifie? Ai-je reçu la dose complète?

R. Certains patients peuvent entendre un faible « clic » juste avant le second « clic » fort. Ce faible « clic » est un bruit normal du stylo. Ne retirez pas le stylo-injecteur de la peau avant d'avoir entendu le second « clic » fort.

Q. Comment savoir si l'injection est terminée?

R. Après avoir appuyé sur le bouton d'injection bleu sarcelle, vous entendrez deux « clics » forts. Le second vous indique que l'injection est terminée. Vous verrez également le piston gris en haut de la base transparente.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation du stylo-injecteur prérempli EMGALITY :

- Appelez votre professionnel de la santé.
- Appelez au 1-888-LillyRx (1-888-545-5972).
- Consultez le site Web www.lilly.ca.

Conservation et manipulation

- Conservez votre stylo-injecteur prérempli au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C.
- Votre stylo-injecteur prérempli peut être conservé hors du réfrigérateur pendant une période maximale de 7 jours. Ne pas conserver à une température supérieure à 30 °C.
- Ne congelez pas votre stylo-injecteur prérempli.
- Protégez votre stylo-injecteur prérempli de la lumière jusqu'à son utilisation.
- N'agitez pas votre stylo-injecteur prérempli.

- Mettez au rebut votre stylo-injecteur prérempli si l'une des conditions ci-dessus n'est pas respectée.
- **Gardez votre stylo-injecteur prérempli et tous vos médicaments hors de la portée des enfants.**

Le stylo-injecteur répond aux normes actuelles d'exactitude de la dose et aux exigences fonctionnelles ISO 11608-1 et 11608-5.

Lisez les Renseignements destinés aux patients contenus dans cette boîte pour en savoir davantage sur EMGALITY.

Eli Lilly and Canada Inc., Toronto (Ontario) M1N 2E8

EMGALITY est une marque de commerce détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés affiliées.

© 2019, Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Date de révision du document : 30 juillet 2019

EMG-120MG-PEN-0001-CA-IFU-201900730