


DIRECTIVES D'UTILISATION

Pr**EMGALITY**^{MC}

galcanézumab injectable

solution pour injection sous-cutanée à 120 mg/mL
seringue préremplie

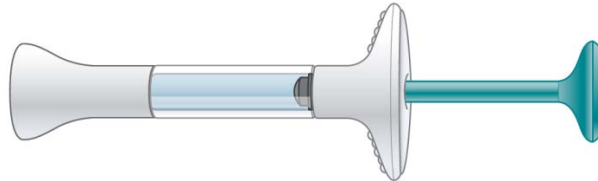

www.lilly.ca

Lilly

Avant d'utiliser la seringue préremplie EMGALITY, lisez attentivement et suivez toutes les directives étape par étape.


Renseignements importants

- Votre professionnel de la santé devrait vous montrer comment préparer et vous injecter EMGALITY à l'aide de la seringue préremplie. Ne vous injectez pas EMGALITY et ne l'injectez pas à une autre personne avant d'avoir reçu une formation appropriée.
- Conservez les présentes Directives d'utilisation afin de pouvoir les consulter ultérieurement, au besoin.
- Chaque seringue préremplie EMGALITY est destinée à **un usage unique**. Ne partagez pas et ne réutilisez pas votre seringue préremplie EMGALITY. Vous pourriez transmettre ou contracter une infection.
- Votre professionnel de la santé pourra vous aider à déterminer à quel endroit de votre corps injecter le médicament. Vous pouvez également lire la section « **Choisissez le point d'injection** » des présentes directives pour choisir l'endroit de votre corps qui vous convient le mieux.
- Si vous avez un trouble de la vue, **n'utilisez pas** la seringue préremplie EMGALITY sans l'assistance d'un aidant.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Avant d'utiliser la seringue préremplie EMGALITY, lisez attentivement et suivez toutes les directives étape par étape.

Composantes de la seringue préremplie EMGALITY

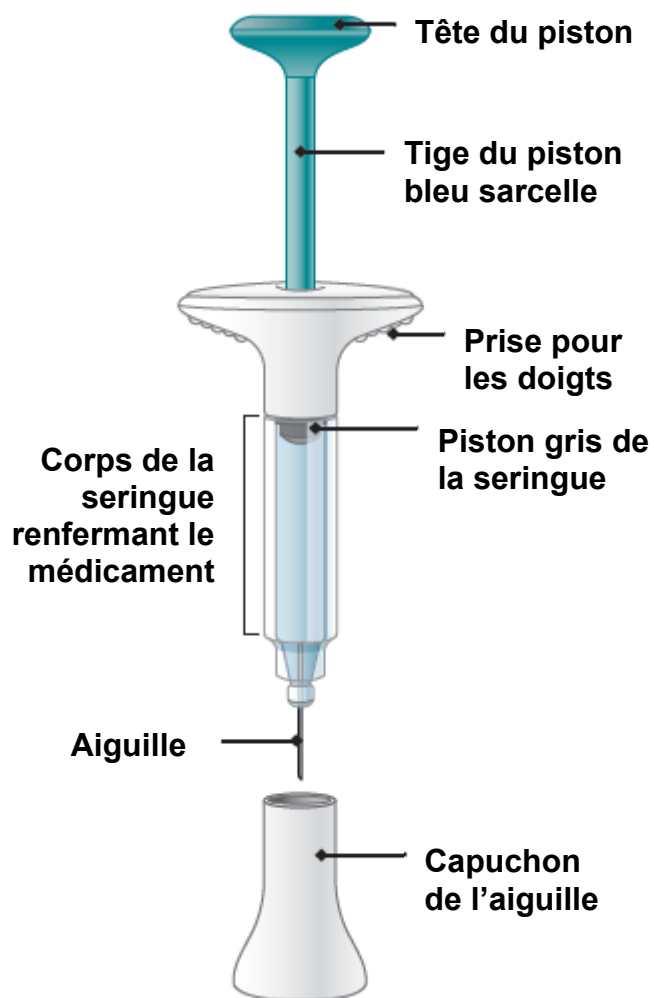

Avant de commencer

Sortez la seringue préremplie du réfrigérateur

Remettez les seringues non utilisées au réfrigérateur, dans l'emballage original.

Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

Afin de rendre l'injection plus confortable, laissez reposer la seringue préremplie à la température ambiante pendant 30 minutes avant l'injection.

Ne placez pas la seringue préremplie dans un four à micro-ondes, dans de l'eau chaude ou sous la lumière directe du soleil.

Ne l'agitez pas.


Inspectez la seringue préremplie et le médicament

Assurez-vous d'avoir le bon médicament. La solution à l'intérieur doit être claire. Elle peut être incolore à jaunâtre.

N'utilisez pas la seringue préremplie et mettez-la au rebut en suivant les consignes de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien :

- si elle semble endommagée;
- si le médicament est trouble, a une couleur anormale ou contient de petites particules;
- si la date de péremption imprimée sur l'étiquette est passée;
- si le médicament a été congelé.

Date de péremption

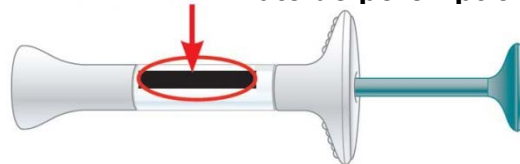


Préparez l'injection

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant de vous injecter EMGALITY. Ayez à portée de main un contenant résistant aux perforations.

Choisissez le point d'injection


Votre professionnel de la santé peut vous aider à choisir le point d'injection qui vous convient le mieux.

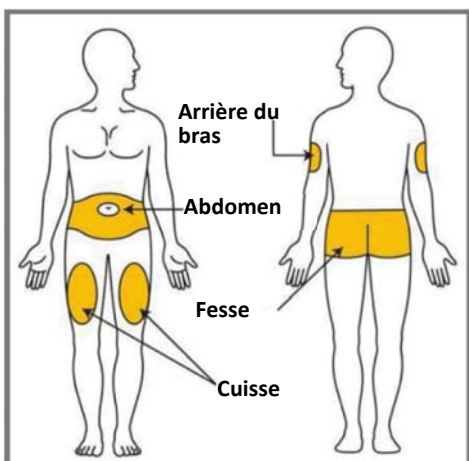

- **Vous** pouvez vous injecter le médicament dans l'abdomen (ventre) ou la cuisse. Ne vous injectez pas à moins de 2 pouces (5 cm) du nombril.
- **Une autre personne** peut également vous l'injecter dans la partie supérieure arrière de votre bras ou dans la fesse.
- **N'injectez pas** le médicament exactement au même endroit d'une fois à l'autre. Par exemple, si vous avez fait la première injection dans l'abdomen, vous pouvez faire l'injection suivante à un autre endroit de l'abdomen.
- **Nettoyez et laissez sécher la zone avant l'injection.**


1 Retirez le capuchon

- Laissez le capuchon de l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.
- Retirez le capuchon de l'aiguille et jetez-le dans la poubelle.
- **Ne remettez pas** le capuchon sur l'aiguille – vous pourriez endommager l'aiguille ou vous piquer par mégarde.
- **Ne touchez pas** l'aiguille.

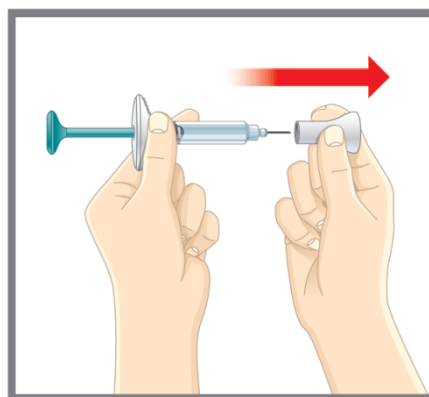


2 Insérez

- Pincez doucement la peau pour former un pli au point d'injection.
- Insérez l'aiguille en formant un angle de 45° avec la peau.

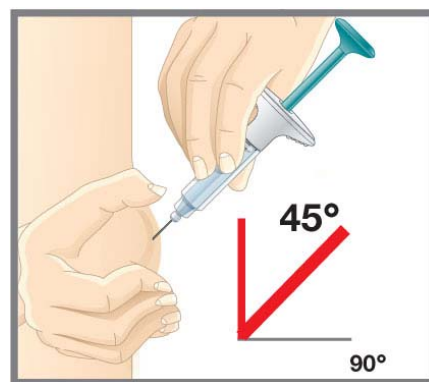


3 Injectez

- Poussez lentement le piston jusqu'au bout pour injecter tout le contenu de la seringue.
- Le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu'à ce qu'il atteigne l'aiguille, au fond de la seringue.

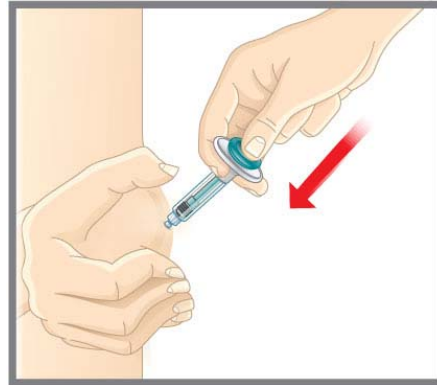

- Lorsque l'injection est terminée, vous devez voir la tige du piston bleu sarcelle dans le corps de la seringue, tel que le montre l'illustration.
- Retirez l'aiguille de votre peau et relâchez doucement votre peau.
- **Ne remettez pas** le capuchon de l'aiguille sur la seringue préremplie.

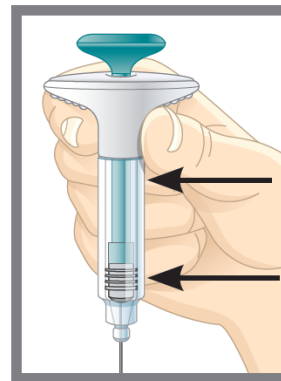


Tige du piston
bleu sarcelle

Piston gris de la
seringue

Une fois l'injection terminée

Mettez au rebut la seringue préremplie utilisée

- Immédiatement après l'utilisation, jetez la seringue préremplie EMGALITY utilisée dans un contenant résistant aux perforations. **Ne jetez pas** la seringue préremplie EMGALITY dans vos ordures ménagères.

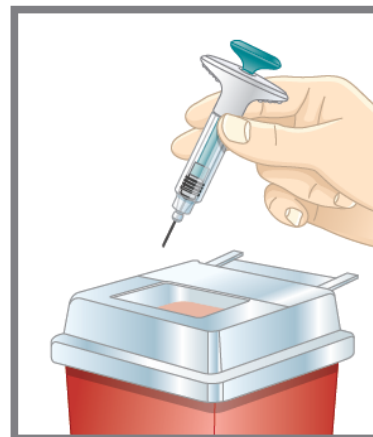

- Si vous n'avez pas de contenant résistant aux perforations, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :

- est fait de plastique résistant;
 - peut être refermé au moyen d'un couvercle étanche, résistant aux perforations et qui empêche les objets pointus de sortir;
 - reste droit et stable pendant l'utilisation;
 - résiste aux fuites; et
 - est muni d'une étiquette indiquant que le contenu est dangereux.
- Lorsque votre contenant résistant aux perforations est presque plein, vous devez suivre les directives de votre localité pour vous en débarrasser correctement. Il existe peut-être des lois provinciales ou locales sur la mise au rebut des aiguilles et des seringues. Pour connaître la bonne façon de mettre au rebut votre contenant, communiquez avec votre professionnel de la santé.
 - **Ne recyclez pas** votre contenant résistant aux perforations une fois qu'il a été utilisé.

Questions fréquentes

Q. Que faire si je vois des bulles d'air dans ma seringue préremplie EMGALITY?

R. La présence de bulles d'air dans la seringue préremplie est normale. EMGALITY est injecté sous la peau (injection sous-cutanée).

Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille lorsque j'enlève le capuchon de l'aiguille?

R. C'est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille.

Q. Que faire si je n'arrive pas à pousser le piston?

R. Si le piston est coincé ou endommagé :

- **arrêtez** d'utiliser la seringue;
- retirez l'aiguille de votre peau;
- mettez la seringue au rebut et prenez une nouvelle seringue.

Q. Que faire s'il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection?

R. C'est normal. Comprimez le point d'injection avec un tampon d'ouate ou une compresse de gaze. Ne frottez pas le point d'injection.

Q. Comment savoir si l'injection est terminée?

R. Quand l'injection est terminée :

- la tige du piston bleu sarcelle est visible dans le corps de la seringue;
- le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu'à ce qu'il atteigne l'aiguille, au fond de la seringue.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de la seringue préremplie EMGALITY :

- Appelez votre professionnel de la santé.
- Appelez au 1-888-LillyRx (1-888-545-5972).
- Consultez le site Web www.lilly.ca.

Conservation et manipulation

- Conservez votre seringue préremplie au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C.
- Votre seringue préremplie peut être conservée hors du réfrigérateur pendant une période maximale de 7 jours. Ne pas conserver à une température supérieure à 30 °C.
- Ne congeler pas votre seringue préremplie.
- N'exposez pas votre seringue préremplie à la lumière jusqu'à son utilisation.
- N'agitez pas votre seringue préremplie.
- Mettez au rebut votre seringue préremplie si l'une des conditions ci-dessus n'est pas respectée.
- **Gardez votre seringue préremplie et tous vos médicaments hors de la portée des enfants.**

Lisez les Renseignements destinés aux patients contenus dans cette boîte pour en savoir davantage sur EMGALITY.

Eli Lilly Canada Inc., Toronto (Ontario) M1N 2E8
EMGALITY est une marque de commerce détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés affiliées.
© 2019, Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.
Date de révision du document : 30 juillet 2019

EMG-120MG-PFS-0001-CA-IFU-20190730